


# 1分でアルブミンとN-hydroxysuccinimideを分離

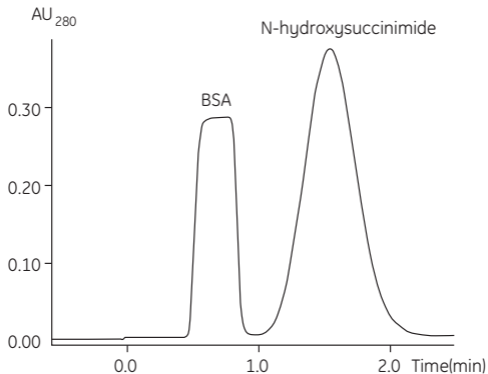

カラム: HiPrep 26/10 Desalting

サンプル: 2 mg BSA/ml, 0.6 mM N-hydroxysuccinimide in  
50 mM リン酸ナトリウム, 0.15 M NaCl, pH 7.0

サンプル量: 10 ml

溶出液: 50 mM リン酸ナトリウム, 0.15 M NaCl, pH 7.0

流速: 31 ml/min (350 cm/h)

検出: UV (280 nm)

システム: ÄKTAexplorer 100